

- CUIDADOS**
- No use productos químicos corrosivos para higienización.
 - Las soluciones más adecuadas para limpieza y el enjuagado deberán tener pH neutro (7,0).
 - Durante la limpieza, utilice detergentes enzimáticos.
 - No use soluciones de limpieza abrasivas.
 - Para realizar el cepillado, utilice solamente cepillos con cerdas suaves.
 - Se podrán utilizar lavadoras ultrasónicas.
 - Use agua en conformidad con la norma Norma ABNT 11816- 2003 o EN-285.
 - Enjuague completamente con agua destilada, desionizada o desmineralizada.
 - Desarme los instrumentos preparándolos para la esterilización.
 - Después del lavado y del enjuagado, seque completa y cuidadosamente los instrumentos con aire comprimido.

MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN Se recomienda la esterilización en "Autoclave" a vapor. Ciclo estándar para autoclave: 134° durante 5 minutos. Otros tiempos y temperaturas del vapor se pueden utilizar, sin embargo, el usuario deberá validar cualesquier desvíos de tiempo y de temperatura recomendados. La temperatura del "Autoclave" no deberá exceder 137° (288°F). También se puede utilizar el método de esterilización por ETO. Los parámetros para utilización de este proceso siguen conforme norma ISO 11.135.

MANEJO Los instrumentos quirúrgicos deberán ser manejados cuidadosamente, transportados y almacenados dentro de cajas e exentos de humedad. Esto es importante especialmente para las mandíbulas y articulaciones. Instrumentos robustos no deberán ser sobrepuestos a instrumentos delicados.

GARANTÍA Todos los productos EDLO tienen garantía de 1 año en lo que se refiere a defectos de materia prima, fabricación o que se los cause durante el transporte. Los productos EDLO quedan sin garantía cuando se los haya modificado, tengan características de mal uso o que hayan sido aplicados en desacuerdo con el propósito para el cual se los proyectó.

PARA SUSTITUCIONES DE PARTES DE LOS PRODUCTOS, ENTRE EN CONTACTO CON EL REPRESENTANTE O LA FÁBRICA.

**INSTRUÇÕES, MONTAGEM
E DESMONTAGEM
DOS INSTRUMENTOS**

**INSTRUMENTO CLASSE I
UTILIZADO PARA:**

• MANIPULAR O ÚTERO

PARA DESMONTAGEM:

- A) Retire a Ponteira (1), desroqueando-a do Copo (2), girando-a até soltar.
- B) Retire o Copo (2), desroqueando-o do Terminal (4), girando-a até soldar.
- C) Retire completamente o Vedante (3) do instrumento.

PARA MONTAGEM:

- D) Recoloque o Vedante (3), inserindo-o em seu lugar de origem.
- E) Recoloque o Copo (2), rosqueando-o ao Terminal (4), girando-o até apertar.
- F) Recoloque a Ponteira (1), rosqueando-a ao Copo (2), girando-a até soltar.

**INTRUCTIONS, ASSEMBLING
AND DISASSEMBLING
INSTRUMENTS**

**INSTRUMENT CLASS I
USE:**

• UTERINE MANIPULATOR

FOR THE DISASSEMBLING:

- A) Take off the tip (1), unthreading it from the cup (2), spinning until it loosens.
- B) Take the cup off (2), unthreading it from the terminal (4), spinning until it loosens.
- C) Completely remove the seal (3) from the instrument.

FOR THE ASSEMBLING:

- D) Put the seal (3) back on, inserting it to its place of origin.
- E) Put the cup back on (2), threading it to the Terminal (4), spinning until it tightens.
- F) Put the tip back on (1), threading it to the cup (2), spinning until it tightens.

**INSTRUCCIONES, ARMADO
Y DESARMADO
DE LOS INSTRUMENTOS**

**INSTRUMENTO CLASE I
UTILIZADO PARA:**


• MANIPULAR EL ÚTERO

PARA DESARMADO:


- A) Retire la Puntera (1), desenroscándola del Vaso (2), girándola hasta soltarla.
- B) Retire el Vaso (2), desenroscándolo del Terminal (4), girándolo hasta soldarla.
- C) Retire completamente la Empaquetadura (3) del instrumento.

PARA ARMADO:

- D) Recoloque la Empaquetadura (3), insertándola en su lugar de origen.
- E) Recoloque el Vaso (2), enroscándolo al Terminal (4), girándolo hasta apretar.
- F) Recoloque la Puntera (1), enroscándolo al Cuerpo (2), girándolo hasta soltar.

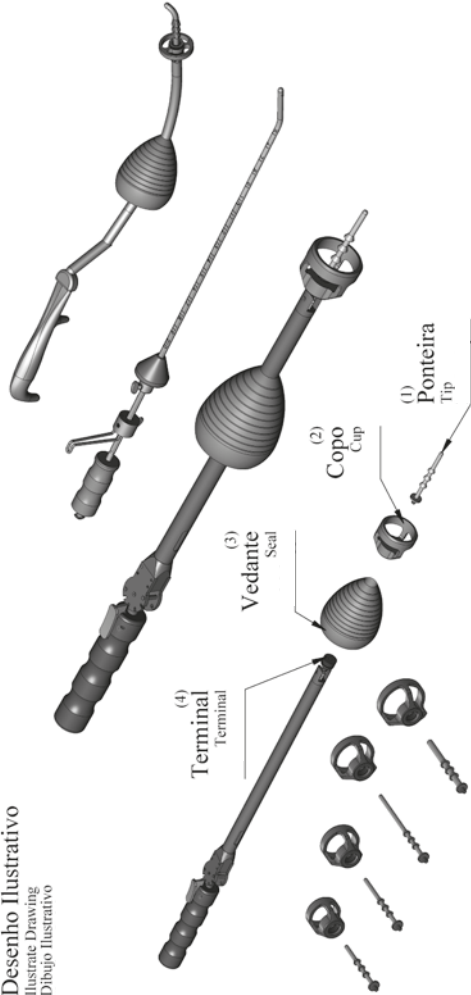

MANIPULADOR UTERINO
UTERINE MANIPULATOR
MANIPULADOR UTERINO

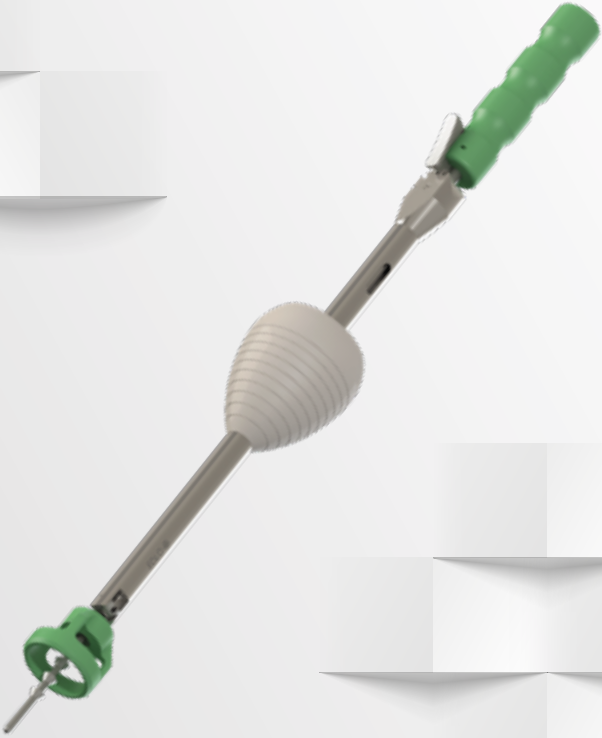

FRÁGIL
FRAGILE
FRÁGIL



MANTER SECO
KEEP DRY
MANTENGALO SECO



NÃO ESTÉRIL
NOT STERILE
NO ESTERIL



LIMITE DE TEMPERATURA
LIMITS OF TEMPERATURE
LÍMITE DE TEMPERATURA



www.edlo.com.br

INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS CONSIDERAÇÕES GERAIS

ATENÇÃO Leia todas as informações. O manuseio e operações incorretas geram desgaste prematuro e diminuição da vida útil do instrumento. Este equipamento obrigatoriamente deverá ser utilizado de forma esterilizada e por pessoas habilitadas: médicos e profissionais ligados à área de enfermagem.

PRIMEIRO USO DE INSTRUMENTOS Antes do primeiro uso, todo instrumento deverá ser limpo e esterilizado. Os instrumentos cirúrgicos videolaparoscópicos EDLO, são compatíveis com os métodos de esterilização por Autoclave e também por Óxido de Etileno (ETO), (Ver métodos de esterilização).

INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO FUNCIONAL É muito importante examinar cuidadosamente cada instrumentocirúrgico com relação a quebras, trincas, danos no isolamento ou mau funcionamento antes do uso. Deve-seter atenção especial às regiões como mandíbulas, bem como todas as partes móveis e articulações. NÃO USE INSTRUMENTOS CIRURGICOS DANIFICADOS! Nunca tente reparar instrumentos. Manutenção e reparos deverão ser realizados somente por pessoal habilitado e qualificado. Questões referentes a reparos deverão ser encaminhadas ao Consultor de Negócios de sua região ou diretamente ao endereço citado neste manual.

DESCONTAMINAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO Cada instrumento deve ser desinfetado e limpo sempre queusado. Limpe e inspecione cuidadosamente cada instrumento. Esterilizar antes do uso. Limpeza e manutenção adequadas prolongam a vida útil do instrumental. Durante a limpeza e esterilização, os instrumentos devem estar desmontados.

INSTRUMENTOS PARA ELETROCIURGIA Ao colocar em uso os instrumentos para eletrocirurgia, deve-se levar em consideração medidas especiais de segurança para evitar assim riscos sérios pelo uso inadequado. Deve ser evitado o contato com instrumentos não isolados. Verificar a conexão dos instrumentos com os cabos e os geradores apropriados. Verificar também se a placa de aterramento está bem conectada. Respeitar os limites de 250V e 1KHZ.

CUIDADOS

- Não use produtos químicos corrosivos para higienização.
- As soluções mais adequadas para limpeza e enxágue deverão possuir pH neutro (7,0).
- Durante a limpeza, utilize detergentes enzimáticos.
- Não use soluções de limpeza abrasivas.
- Para realizar a escovação, utilize somente escovas com cerdas macias.
- Poderão ser utilizadas lavadoras ultrassônicas.
- Use água em conformidade com a Norma ABNT 11816- 2003 ou EN-285.
- Enxágue completamente com água destilada, deionizada ou desmineralizada.
- Prepare para esterilização, desmontando os instrumentos.
- Após a lavagem e enxágue, secar completa e cuidadosamente os instrumentos com ar comprimido.

MÉTODOS DE ESTERILIZAÇÃO A esterilização em "Autoclave" a vapor é recomendada. Ciclo padrão para autoclave: 134º por 5 minutos. Outros tempos e temperaturas do vapor podem ser utilizados, entretanto, o usuário deverá validar quaisquer desvios de tempo e temperatura recomendados. A temperatura da "Autoclave" não deverá exceder 137º (288ºF). O método de esterilização por ETO também pode ser utilizado. Os parâmetros para utilização deste processo seguem conforme norma ISO 11.135.

MANUSEIO Os instrumentos cirúrgicos deverão ser manuseados cuidadosamente, transportados e armazenados dentro de caixas e isentos de umidade. Isto é importante especialmente para as mandíbulas e articulações. Instrumentos robustos não deverão ser sobrepostos a instrumentos delicados.

GARANTIA Todos os produtos EDLO possuem garantia de 1 ano quanto a defeitos de matéria-prima, fabricação, ou que sejam causados durante o transporte. Os produtos EDLO ficam isentos de garantia quando tiverem sido modificados, possuindo características de mau uso ou que tenham sido aplicados em desacordo com o propósito para o qual os mesmos foram projetados.

PARA REPOSIÇÕES DE PARTES DOS PRODUTOS, CONTATE O REPRESENTANTE OU A FÁBRICA.

SURGICAL INSTRUMENTS GENERAL CONSIDERATIONS

ATTENTION Read all information. Misuse and improper handling cause premature wear and decrease the instrument's life. This equipment must, obligatorily, be used sterile and handled by qualified personnel: physicians and nursing professionals.

FIRST TIME USE Before the first use, the instrument must be cleaned and sterilized. EDLO video laparoscopic surgery instruments are compatible with the Autoclave and ETO sterilization methods, (See sterilization methods).

FUNCTIONAL INSPECTION AND VERIFICATION It is extremely important to carefully examine each and every instrument for breakage, cracks, insulation damage or malfunction before use. Special attention should be paid to the jaws and articulations and mobile parts. DO NOT USE DAMAGED SURGICAL INTRUMENTS Never try to repair the instruments. Maintenance and repairs should be done by qualified

personnel only. Questions concerning repairs should be sent to your region's Business Consultant or directly to the address mentioned in this Manual.

DECONTAMINATION, CLEANING AND MAINTENANCE Every instrument must be disinfected and cleaned after each use. Carefully clean and inspect each instrument. Sterilize before use. Appropriate cleaning and maintenance prolong the instrument's life. Instruments must be dismantled during cleaning and sterilization.

INSTRUMENTS FOR ELECTROSURGERY Once you have started using Electrosurgery instruments, some special safety measures must be taken into account, so that severe risks due to improper use can be prevented. Contact with non-insulated instruments must be avoided. Make sure the instrument is well connected to the cables and power generators. Make sure the grounding plate is duly connected. 1KHZ and 250V limits must be respected.

CARE

- Do not use corrosive chemical products to sanitize.
- Cleaning and washing solutions must have a neutral pH factor (7.0).
- Use enzymatic detergent during cleaning.
- Do not use abrasive cleaning solutions.
- Use only soft bristle brushes.
- Ultrasonic washers may be used.
- Use water as dictated by ABNT 11816-2003 or EN-285.
- Rinse with distilled, deionized or demineralized water.
- Dismantle instruments in preparation for sterilization.
- After washing, dry instruments completely with compressed air.

STERILIZATION METHODS Steam autoclave sterilization is recommended. Standard cycle for autoclave: 134º for 5 minutes. Different times and steam temperatures can be used. However, user must validate any and all recommended time and temperature variances. The temperature must not exceed 137º (288ºF). The ETO sterilization method can also be used. The parameters for using this process follow the standard.

HANDLING The surgical instruments must be carefully handled, transported and stored in moisture-free boxes. This measure is especially important for jaws and articulations. Heavier, sturdy instruments should not be placed on top of more delicate instruments.

WARRANTY All EDLO products have a 1-year warranty against raw-material, manufacturing or transportation defects. EDLO products will no longer be covered by the warranty if they are modified, mishandled, misused, or used for purposes not in accordance with what they were made for.

CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE OR THE FACTORY FOR REPLACEMENT PARTS.

INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS – CONSIDERACIONES GENERALES

ATENCIÓN Lea todas las informaciones. El manejo y las operaciones incorrectas generan desgaste prematuro y disminución de la vida útil del instrumento. A este equipo obligatoriamente se lo deberá utilizar de forma esterilizada y por personas habilitadas: médicos y profesionales ligados al área de enfermería.

PRIMER USO DE INSTRUMENTOS Antes del primer uso, se deberán limpiar y esterilizar todo los instrumentos. Los instrumentos quirúrgicos videolaparoscópicos EDLO, son compatibles con los métodos de esterilización por Autoclave y también por Óxido de Etileno (ETO), (Ver métodos de esterilización).

INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN FUNCIONAL Es muy importante examinar cuidadosamente cada instrumento quirúrgico con relación a roturas, grietas, daños en el aislamiento o mal funcionamiento antes del uso. Se debe tener atención especial a las regiones como mandíbulas, así como todas las partes móviles y las articulaciones. iNO USE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DANADOS! Nunca intente reparar instrumentos. Los mantenimientos y las reparaciones los deberán realiza solamente personal habilitado y calificado. Los asuntos referentes a las reparaciones se los deberá enviar al Consultor de Negocios de su región o directamente a la dirección citada en este manual.

DESCONTAMINACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Se deben desinfectar y limpiar todos los instrumentos siempre que se los use. Limpie e inspeccione cuidadosamente cada instrumento. Esterilícelo antes del uso. Limpieza y mantenimiento adecuados prolongan la vida útil del instrumental. Durante la limpieza y esterilización, se deben desarmar los instrumentos.

INSTRUMENTOS PARA ELECTROCIURUGÍA Al colocar en uso los instrumentos para electrocirugía, se debe llevar en consideración a medidas especiales de seguridad para evitar así riesgos serios por el uso inadecuado. Se debe evitar el contacto con instrumentos no aislados. Verificar la conexión de los instrumentos con los cables y generadores apropiados. Verificar también si la placa de conexión a tierra está bien conectada. Respete los límites de 250V y 1KHZ.



www.edlo.com.br



PRODUZIDO E COMERCIALIZADO POR
DGTECH Indústria e Comércio Ltda.
Av. Francisco Silveira Bitencourt, 1225/14
Bairro Sarandi / Porto Alegre / RS
CEP: 91150-010 Brasil

Fone: +55 51 3025-3600

E-mail: dgtech@dgtech.ind.br

RMS nº
80092979001
80092970002